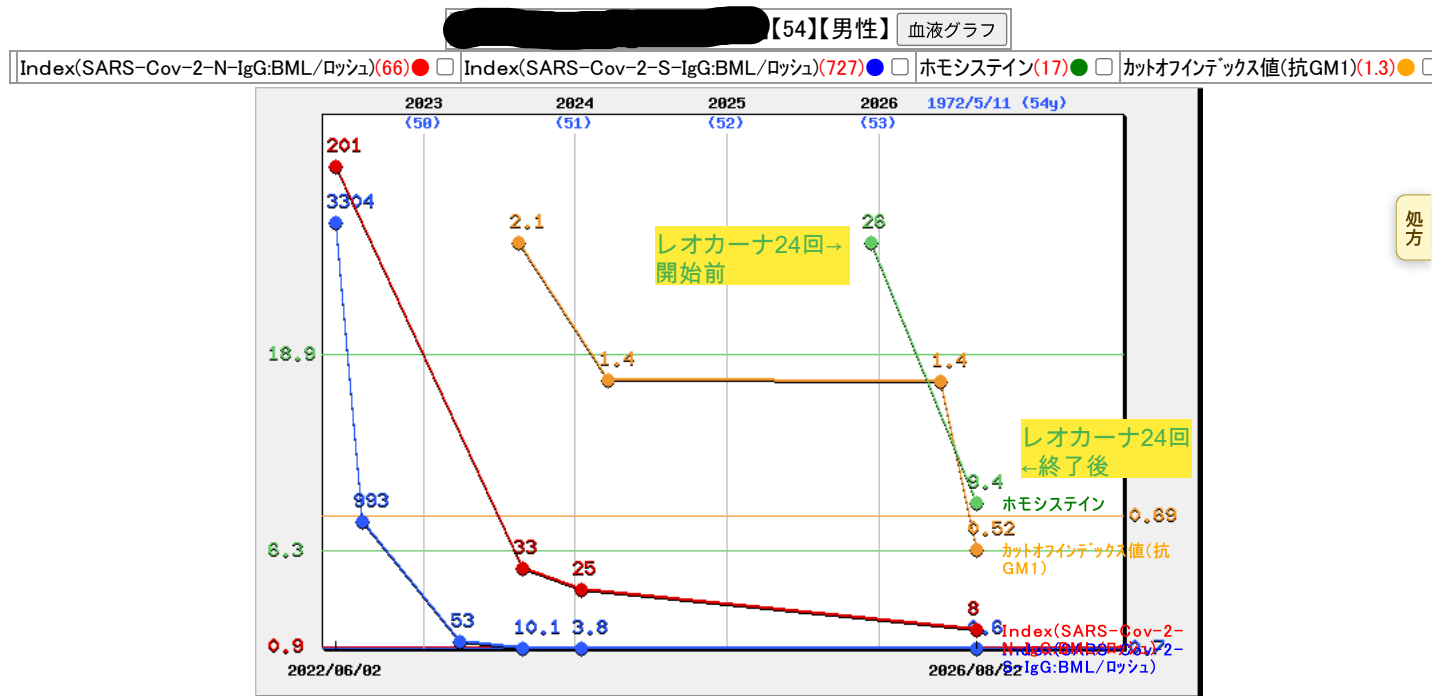




ホモシステインをレオカーナ(LDL吸着)開始前、終了後に測定

↑
レオカーナ施行時期

ホモシステイン

抗GM1-IgG(ギランバレー症候群)抗体

COVID19-N抗体

COVID 19-S抗体

すべて大幅に(著明)に吸着・低下

従来のLDL吸着膜(リソバ®)のリガンドはデキストラン硫酸のマイナス荷電を利用。

新しいLDL吸着膜のレオカーナ®は、デキストラン硫酸に加え、トリプトファンをリガンドに利用。

一方、免疫吸着膜のセリブ®はデキストラン硫酸で、SLEなどの抗体を除去。

他にもリソバ®PH膜は、フィニルアラニンを利用してSLEやギランバレー症候群や、多発性硬化症などの抗体を除去。

リソバ®TR膜は、トリプトファンを利用して、重症筋無力症などの神経疾患の抗体除去。

以上から、レオカーナは、脂質の改善だけでなく、免疫吸着も同時におこなっていることがわかります。